



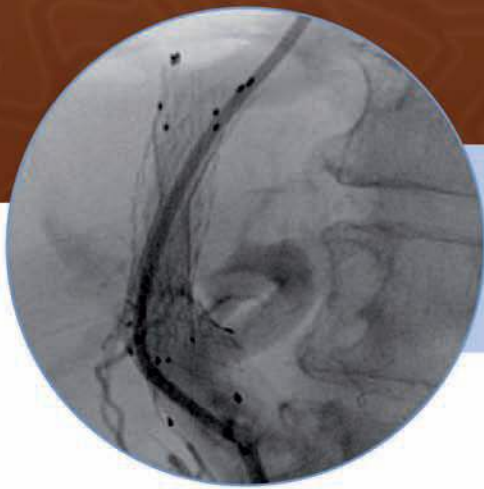

Reducing the bloodflow

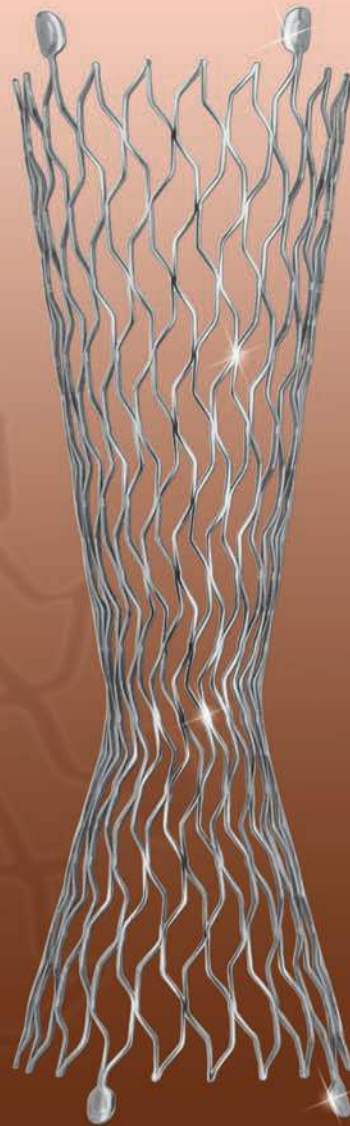

sinus-Reduction Stent

Self-expandable Nitinol Stent System

Das taillierte Design und ein bewusstes Oversizing des sinus-ReduzierStents gewährleistet eine schnelle und kontrollierte Reduktion des Blutflusses nach TIPS-Stent Anlage

The waisted design and the deliberate oversizing of the sinus-ReductionStent provides an immediate and controlled reduction of the bloodflow, following the preparation of the TIPS-Stent

10F .035 inch

OptiMed
global care


Der sinus-ReduzierStent im Sanduhr-Design



- ▶ Selbstexpandierender Nitinol-Stent zur Reduktion des Blutflusses
- ▶ Anti-Jump-Technik für exakte Platzierung
- ▶ Distale und proximale Tantal-Marker für hervorragende Sichtbarkeit
- ▶ Repositionierbar bis zu 80% der Nennlänge

The sinus-ReductionStent with hourglass-design

- ▶ Selfexpanding Nitinol-Stent for reduction of blood flow
- ▶ Anti-Jump-Technique for exact placement
- ▶ Distal and proximal tantalum markers for enhanced visibility
- ▶ Repositionable up to 80% deployment

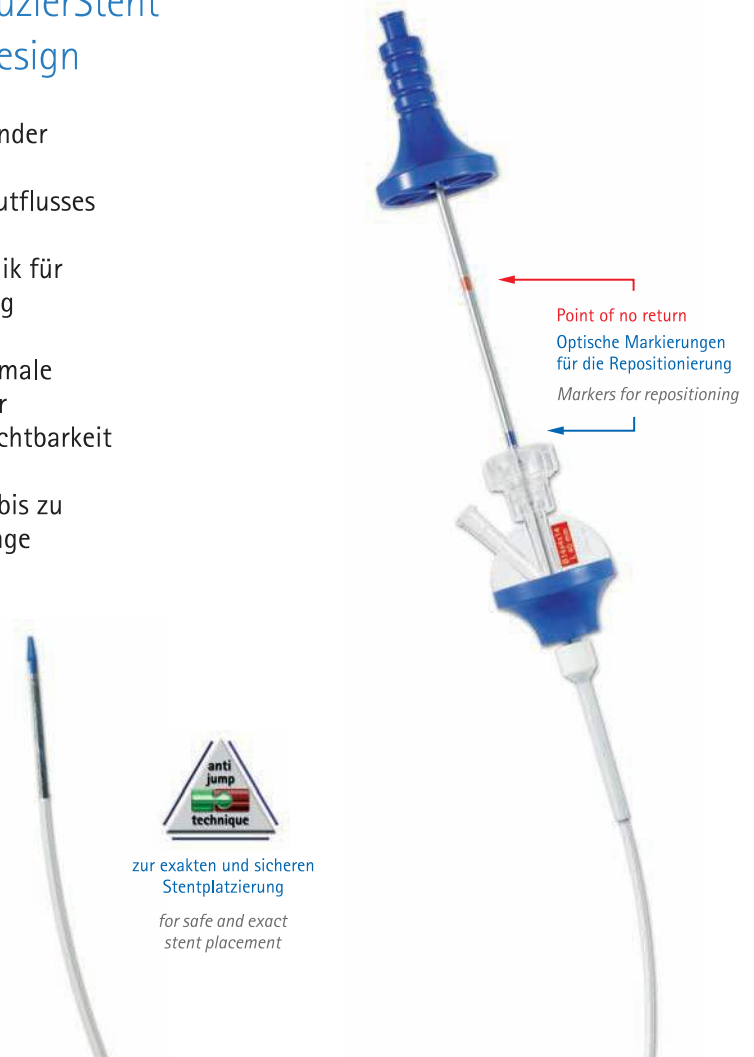

zur exakten und sicheren
Stentplatzierung
for safe and exact
stent placement

Applikationsbesteck Application Device	Stent Länge Stent Length	Aussen Ø Exterior Ø	Taillen Ø Waistline Ø	Bestell-Nr. Order-Code
F / cm	mm	mm	mm	
10F – 70 cm	40	14	4	7544-6540
	40	14	5	7554-6540

Adaptiert auf .035inch Führungsdraht
Adapted to .035inch guidewire

Verpackungseinheit: 1 Stück
Box: 1 unit

Distributed by:

die perfekten Ergänzungen: the perfect supplements:

▶ TIPS-Puncture Set

bei portaler Hypertension
for portal hypertension

▶ sinus-SuperFlex-Visual 6F

der kraftvolle superflexible Stent
the strong superflexible stent